

ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA



BD7780

IMPORTER I AUTORYZOWANY SERWIS:

REMIX

UL. OSTRÓDZKA 199H, 03-289 WARSZAWA

TEL. 022 353 85 60

www.remixmedyczny.com, serwis@remixmedyczny.com



EXCLUSIVE
SensorDisc
TECHNOLOGY

LONGLIFE
BATTERY



WPROWADZENIE

Twoja nowa elektroniczna waga została zaprojektowana tak, aby dokładnie wskazywać Twoją wagę i prawidłowo działać przez wiele lat.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- Bardzo precyzyjny system czujników i wskaźników naprężeniowych
- Waga maksymalna: 200 kg
- Dokładność: 100 g
- Automatyczne zerowanie
- Automatyczne wyłączenie
- Włącznik nożny
- Wskaźnik wyczerpanej baterii / Wskaźnik przeciążenia

ZASILANIE

Bateria: 1 x CR2032

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo”, otwórz komorę baterii i wymień baterię na nową.


UWAGA: Wyczerpanej baterii nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

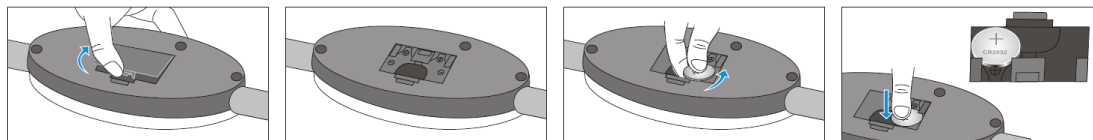

KORZYSTANIE Z WAGI:

KROK 1: Postaw wagę na twardej płaskiej powierzchni (unikaj stawiania na dywanie lub miękkiej powierzchni).

KROK 2: Włącz wagę jednym dotknięciem stopy o szklaną powierzchnię i odczekaj kilka sekund aż pojawią się następujące symbole:

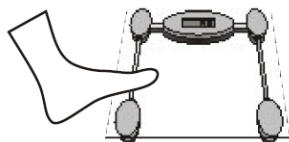

(**UWAGA:** Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err” jeśli staniesz na wadze zanim na wyświetlaczu pojawi się „0.0”. W takim przypadku powtórz krok 2.)



KROK 3: Delikatnie stań na wadze. Ułóż stopy równo sobie i nie ruszaj się dopóki waga nie wyświetli Twojego wyniku.



AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Po zejściu z wagi, gdy na wyświetlaczu będzie wyświetlać się 0, urządzenie wyłączy ona automatycznie po ok. 6 sekundach.

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

Gdy na wadze znajduje się ciężar przekraczający 200 kg na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err”.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z WAGI:

Stawianie wagi na twardej i płaskiej powierzchni zapewni wysoką dokładność i wiarygodność wyniku.

Zawsze dokonuj pomiaru na tej samej wadze znajdującej się w tym samym miejscu.

Nierówne podłoże może zakłócić wynik.

Pomiaru należy dokonywać bez ubrania i obuwia, przed posiłkiem i zawsze o tej samej porze dnia, najlepiej rano.

Twój wynik jest zaokrąglany w dół lub górę do najbliższych 100 g. Jeśli zważysz się dwukrotnie i otrzymasz odczyty różniące się o 100g, oznacza to, że właściwy wynik leży pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Wagę należy czyścić wilgotną szmatką, ale tak aby woda nie dostała się do wagi. Nie wolno używać środków chemicznych.

Nie wolno dopuścić do zalania wagi wodą, ponieważ może to uszkodzić podzespoły elektroniczne.

Wagi nie wolno stawiać pionowo, ponieważ może to uszkodzić baterię.

Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy z niej wyjąć baterię. Na wadze nie wolno skakać.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oznakowanie urządzenia symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje, że sprzęt ten oraz bateria po okresie ich użytkowania nie mogą być umieszczane z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik obowiązany jest do oddania ich prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbierania, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

