


BREMED BD 555

AUTOMATYCZNY MIERNIK CIŚNIENIA KRWI NA NADGARSTKU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

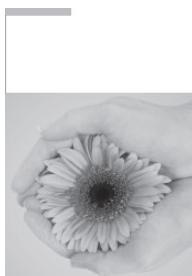

SPIS TREŚCI

1. UWAGI OGÓLNE
2. OPIS URZĄDZENIA
3. POSTĘPOWANIE PODCZAS POMIARU
4. USTERKI ICH PRZYCZYNY I USUWANIE
5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
6. DANE TECHNICZNE

WYŁĄCZNY IMPORTER I AUTORYZOWANY SERWIS BREMED:

REMIX

03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 199H
tel. 22 49 81 181, fax: 22 353 85 61
www.remixmedyczny.com
e-mail: serwis@remixmedyczny.com

1. UWAGI OGÓLNE

O CIŚNIENIU TĘTNICZYM KRWI

Ciśnienie tętnicze jest to ciśnienie wywierane na ścianki tętnic, kiedy płynie przez nie krew. Ciśnienie systoliczne (skurczowe) powstaje wtedy gdy serce się kurczy i tłoczy krew do żył. Ciśnienie diastoliczne (rozkurczowe)- kiedy krew powraca do serca. Problemy pojawiają się kiedy wartości ciśnienia są zbyt wysokie, co powoduje schorzenia serca, a w rezultacie udar mózgu lub zawał.

Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia choroba serca są przyczyną śmierci numer 2 a udar mózgu numer 3. W związku z tym bardzo ważną rolę odgrywa kontrola ciśnienia krwi, która pozwoli na wczesne wykrycie nadciśnienia krwi. Późniejsza terapia (oczywiście wraz z lekarzem), może zapobiec wielu innym schorzeniom, a samo nadciśnienie nie musi być wadą, jeżeli będziecie się państwo stosować do zaleceń lekarza. Aby stwierdzić nadciśnienie, trzeba je kontrolować przez długi czas i porównywać wartości. Jednorazowy pomiar nic nie mówi o ciśnieniu, składa się na to zbyt wiele czynników. Ciśnienie mierzone przez lekarza, bądź pielęgniarkę, często jest wyższe od wartości uzyskanych w domu, mimo poprawnego wykonania obydwu pomiarów. Przyczyna tego zjawiska jest znana: wielu pacjentów podczas wizyty u lekarza jest mniej lub bardziej napięta psychicznie (kompleks "białego fartucha"). Przekonacie się państwo o tym jeżeli będziecie prowadzić kontrolę ciśnienia w domu, a wyniki będą notowane i porównywane. Przypominamy aby obraz ciśnienia był jasny, należy przeprowadzać kontrolę codziennie (najlepiej rano i wieczorem), a uzyskane wyniki zanotować!

Ciśnienie tętnicze krwi nie jest stałą wartością. Waha się ono w ciągu dnia o 20 do 40 mmHg. U chorych na nadciśnienie wahania te są jeszcze wyższe. Najniższe ciśnienie występuje nocą, najwyższe podczas obciążenia fizycznego lub psychicznego. Także w ciągu normalnego dnia może przyjmować różne wartości, dopasowuje się do każdej sytuacji, podniecenia, zdenerwowania itp.

Jest to bardzo istotna uwaga - ciśnienie nie jest wartością stałą, dlatego kontrola powinna przebiegać o tej samej porze dnia i w podobnych warunkach.

ISTOTNE WSKAZÓWKI DLA UZYSKANIA PRAWIDŁOWYCH POMIARÓW

- Przed pomiarem ciśnienia krwi, należy unikać jedzenia, picia (alkoholu), palenia i ćwiczeń sportowych, ponieważ może wpływać na poziom ciśnienia krwi.
- Przed każdym pomiarem należy wygodnie usiąść na krześle i odprężyć się. Zalecamy sprawdzanie ciśnienia krwi dwa razy dziennie, rano po wstaniu z łóżka i wieczorem po pracy, albo zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Podczas pomiaru ciśnienia krwi należy pozostać w spoczynku i powstrzymać się od mówienia oraz poruszania się.
- Aby pomiar był porównywalny należy dokonać go na tej samej ręce.
- Zimno ma wpływ na ciśnienie. Najlepiej dokonywać go w temperaturze ok. 20°C.
- Nie mierzyć ciśnienia zaraz po kąpieli i korzystaniu z toalety.
- Jak pokazuje ilustracja, powinniśmy oprzeć lewe przedramię, tak aby mankiet znalazł się na poziomie serca.
- Między dwoma kolejnymi odczytami należy zrobić co najmniej pięciominutową przerwę, ponieważ przepływ krwi przez ramię jest utrudniony, co może zniekształcić wyniki pomiaru.
- Aby uzyskać znaczące odczyty, powinniśmy mierzyć ciśnienie krwi codziennie o tej samej porze, najlepiej rano i wieczorem.

WAŻNE:

- Pomiar ciśnienia krwi nie jest pożądany w przypadku zaawansowanej arteriosklerozy (stwardnienie arterii). Jeżeli w takim przypadku chcielibyście Państwo korzystać z tego aparatu, należy to skonsultować z lekarzem.
- Wyświetlanie pulsu nie jest odpowiednie dla monitorowania częstotliwości stymulatorów serca.
- Kobiety w ciąży powinny mierzyć ciśnienie krwi tylko w porozumieniu z lekarzem, ponieważ odczyty mogą być zmienione w wyniku ciąży.

UWAGA:

Pomiar nie jest tym samym co leczenie !


Nigdy nie należy zmieniać dawek leków przepisanych przez lekarza.

2. OPIS URZĄDZENIA


BREMED BD 555 jest zwartym, całkowicie automatycznym urządzeniem dokonującym pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku.

Urządzenie BREMED BD 555 wykorzystuje oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia krwi podczas przepływu krwi przez arterię ramieniową i przetwarza go na odczyt cyfrowy. Wskaźnik oscylometryczny nie wymaga użycia stetoskopu, jest więc prosty w użyciu. Mankiet zostaje wypełniony powietrzem po naciśnięciu przycisku i automatycznie je wypuszcza, dopóki pomiar nie zostanie zakończony. Sygnalizatory błędów ostrzegają o nieprawidłowym przebiegu procedury, a funkcja automatycznego wyłączenia zapobiega wyladowaniu baterii.

OPIS APARATU

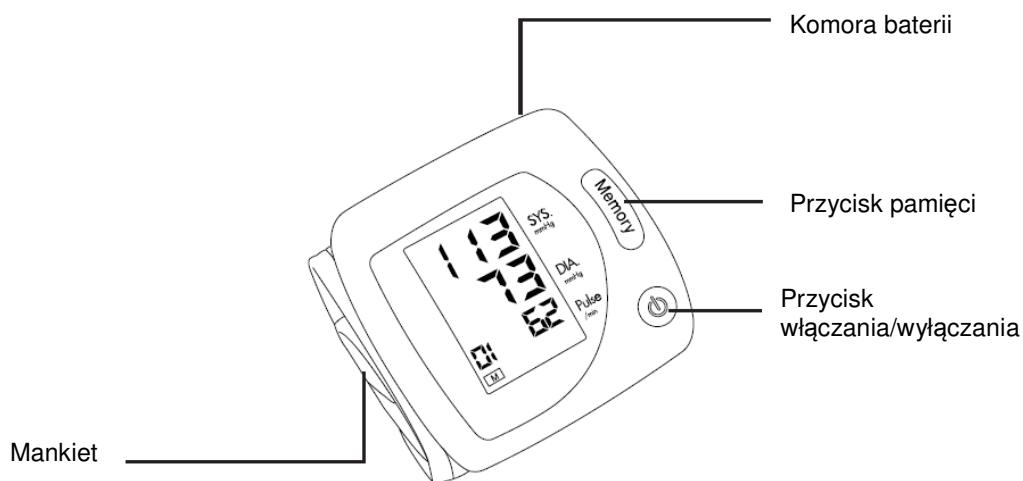


OPIS WYŚWIETLACZA

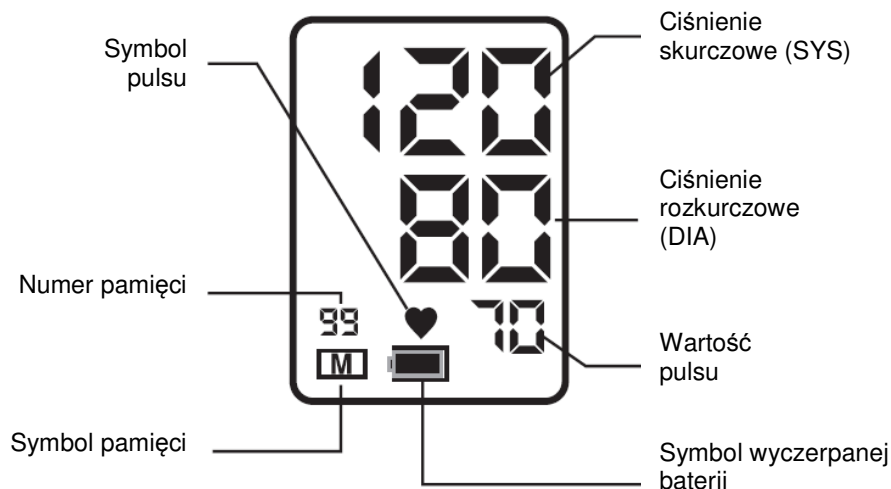

3. POSTĘPOWANIE PODCZAS POMIARU


ZAKŁADANIE BATERII

Pociągnij za pokrywę komory baterii w kierunku pokazanym na rysunku.

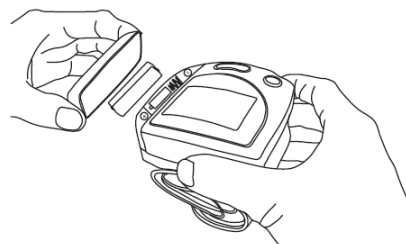

Włożyć 2 baterie alkaliczne 1,5 V typu LR03 (AAA) sprawdzając ich biegunowość.

Założyć pokrywę komory.


Kiedy symbol wyładowania baterii  zapala się, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.

UWAGA: Zużytych baterii nie wolno wyrzucać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

ZAKŁADANIE MANKIETU

Usiądź prosto na krześle i zrelaksuj się. Obie stopy powinny stać na podłodze.

Umieść nadgarstek z aparatem na wysokości serca. Oprzyj łokieć na stole i skieruj wewnętrzną część dłoni ku górze.

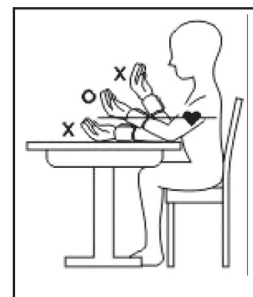

Założ mankieta wokół gołego przegubu ręki tak, aby aparat znalazł się po wewnętrznej stronie przedramienia.

Zapnij mankieta na rzep w sposób przedstawiony na rysunku. Aparat powinien znajdować się ok. 1-2 cm od krawędzi dłoni.

WAŻNE:

Jeżeli podciągasz rękaw, upewnij się, czy nie blokuje on przepływu krwi przez ramię.

Upewnij się, że aparat znajduje się na wysokości serca.

DOKONANIE POMIARU


1. Wciśnij przycisk włączania/wyłączania  w celu włączenia urządzenia.


Na wyświetlaczu pojawią się przez ok. 2 sekundy wszystkie symbole – jest to test wyświetlacza.

Następnie aparat zacznie automatycznie pompować mankieta, a na wyświetlaczu pojawi się litera „P” oraz wartość ciśnienia znajdującego się aktualnie w mankiecie. Pamiętaj, aby nie ruszać się, nie rozmawiać i oddychać miarowo podczas pomiaru.

Gdy wystarczająca wartość powietrza znajduje się w mankiecie, aparat zacznie spuszczać powoli powietrze z mankieta, a na wyświetlaczu zacznie zmniejszać się wartość ciśnienia, a symbol pulsu będzie migać i pojawi się sygnał dźwiękowy w rytm bicia serca. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, aparat może „dopompować” mankieta do wyższej wartości.

Po dokonaniu pomiaru aparat automatycznie wypuści powietrze z mankieta i na wyświetlaczu pojawi się wynik zmierzonego ciśnienia i pulsu oraz pojawi się sygnał dźwiękowy.

2. Wciśnij przycisk włączania/wyłączania  w celu wyłączenia aparatu.

UWAGA: Możesz wcisnąć w każdej chwili przycisk włączania/wyłączania , aby przerwać pomiar.

UWAGA: Pomiędzy poszczególnymi pomiarami należy robić ok. 10-minutowe przerwy, aby żyły wróciły do normalnego stanu.

Jeżeli ciśnieniomierz wykryje regularną pracę serca, ale gdy wartość pulsu będzie wynosiła poniżej 58 uderzeń na minutę, wartość pulsu będzie występowała na zmianę z symbolem „Lo”.

Jeżeli ciśnieniomierz wykryje regularną pracę serca, ale gdy wartość pulsu będzie wynosiła powyżej 100 uderzeń na minutę, wartość pulsu będzie występowała na zmianę z symbolem „HI”.

KORZYSTANIE Z PAMIĘCI APARATU


Ciśnieniomierz automatycznie zapisze wynik pomiaru w pamięci.

Aparat wyłącza się samoczynnie po 3 minutach.

Urządzenie zapamiętuje 40 wyników pomiarów. W przypadku przekroczenia 40 zapisów, aparat automatycznie kasuje najstarszy pomiar.

W celu odczytania wyniku pomiaru przy włączonym lub wyłączonym aparacie należy wcisnąć przycisk pamięci „M” aż pojawi się zapamiętany wynik, Następnie wciskając przycisk pamięci „M” możesz przeglądać zapisane wyniki od najnowszego do najstarszego (wyniki są ponumerowane od 1 do 40).

4. USTERKI, ICH PRZYCZYNY I USUWANIE

Problem	Przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Po wciśnięciu przycisku  na ekranie nic się nie pojawia	1. Baterie są wyczerpane. 2. Baterie są umieszczone nieprawidłowo.	1. Wymień baterie na nowe. 2. Upewnij się czy baterie są umieszczone prawidłowymi biegunami.
Na ekranie pojawia się komunikat „ERR P”	Mankiet nie jest napełniany prawidłowo.	Sprawdź mankiet. Jeśli zajdzie potrzeba zapnij go mocniej.
Na ekranie pojawia się komunikat „ERR 1”	Mankiet jest nieszczelny i za szybko wypuszcza powietrze.	Skontaktuj się z serwisem lub wymień mankiet na nowy.
Na ekranie pojawia się komunikat „ERR 2”	1. Nastąpił ruch podczas pomiaru. 2. Wystąpiły zakłócenia	1. Powtórz pomiar siedząc spokojnie i bez ruchu. 2. Przesuń dalej sprzęt, który może powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
Na ekranie pojawia się komunikat „ERR 3”	Złe dane	Mankiet nie został założony prawidłowo. Zdejmij go i załóż poprawnie.

5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Do czyszczenia aparatu używać tylko miękkich, lekko zwilżonych ściereczek. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników ani podobnych środków chemicznych.
- Plamy na mankiecie można ostrożnie usunąć wilgotną szmatką i roztworem mydła. Mankietów nie można prać ani moczyć.
- Mankietu nie zwijać zbyt ciasno ani nie łamać.
- W żadnym wypadku nie przeprowadzać samodzielnie napraw, jeśli wystąpi uszkodzenie zwrócić do serwisu lub poprosić o radę sprzedawcę.
- Urządzenia nie wolno narażać na działanie ekstremalnych temperatur, wilgotności oraz bezpośrednie światło słoneczne. Unikać upuszczania i narażania aparatu na wstrząsy.
- Urządzenie należy chronić przed kurzem
- Aparat można czyścić suchą szmatką. Mankiet można czyścić suchą lub nawilżoną szmatką. Nie wolno używać środków chemicznych czy alkoholu.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych. W przypadku nie używania ciśnieniomierza przez dłuższy czas należy wyjąć baterie.
- Trzymać aparat z dala od dzieci.
- Urządzenia nie wolno rozkręcać ani rozkładać. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z serwisem.
- W przypadku występowania u danej osoby migotania przedsionków, cukrzycy, słabego tętna, problemów nerkowych, a także u pacjentów po zawale lub u osób nieprzytomnych mogą wystąpić trudności z pomiarem ciśnienia.
- Działanie ciśnieniomierza można w każdej chwili zatrzymać poprzez wciśnięcie przycisku włączania/wyłączania.

- Jeśli mankieta zostanie napełniony do 300 mmHg, urządzenie samoczynnie wypuści powietrze z mankieta.
- Oznakowanie urządzenia symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje, że sprzęt ten oraz znajdujące się w nim baterie po okresie ich użytkowania nie mogą być umieszczane z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik obowiązany jest do oddania ich punktom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.



Urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG. Ciśnieniomierz jest zaprojektowany zgodnie z normą europejską EN1060, Nieinwazyjne ciśnieniomierze Część 1: Wymagania ogólne oraz Część 3: Wymagania dodatkowe dla elektromechanicznych systemów pomiaru ciśnienia krwi.



6. DANE TECHNICZNE

MODEL	BD 555
TYP	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi
WYŚWIETLACZ	cyfrowy LCD
ZAKRES POMIAROWY	ciśnienie 20 mmHg - 280 mmHg, puls 40 - 195 / min
DOKŁADNOŚĆ	ciśnienie +/- 3 mmHg, puls +/- 5%
NAPEŁNIANIE POWIETRZEM	automatycznie
WYPUSZCZANIE POWIETRZA	automatyczny zawór spustowy
METODA POMIARU	oscylometryczna
ŹRÓDŁO ZASILANIA	2 baterie alkaliczne LR03 (AAA) 1,5 V
CZAS ŻYCIA BATERII	nowe baterie wystarczają średnio na ok. 150-200 pomiarów
WARUNKI PRACY	temp. 10-40°C, wilgotność 10-85%
WARUNKI TRANSPORTU	temp. -20-70°C, wilgotność 10-95%
MASA	ok. 140 g bez baterii
PAMIĘĆ	40 pomiarów
WYMIARY ZEWN.	80 x 85 x 60 mm
ROZMIAR MANKIETU	22 do 32 cm (istnieje możliwość zamówienia innego rozmiaru)
WYPOSAŻENIE	instrukcja, opakowanie, baterie, karta gwarancyjna
PRODUCENT	Bremed Limited Unit 1104, 11/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom Kowloon, Hong Kong
PRZEDSTAWICIEL W UE	Bremed Italy S.r.l. Loc. Duesanti Voc. Palombaro 69, 06059 Todi (PG), Włochy
KRAJ POCHODZENIA	PRC

WYŁĄCZNY IMPORTER I AUTORYZOWANY SERWIS FIRMY BREMED:

REMIX

03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 199H

tel. 22 49 81 181, fax: 22 353 85 61

www.remixmedyczny.com

e-mail: serwis@remixmedyczny.com



mod. BD555

BREMED®

Todi (PG) - Italy

Product Imported

www.bremed.com

